

Serumhouder

02594 De mobiele serumhouder op voet is in hoogte verstelbaar en vlot verrijdbaar.

Onderstel

- De serumhouder bestaat uit een verstelbaar deel Ø 19 mm voorzien van vier massief stalen serumhaken.
- De vaste buis Ø 25 mm (bij kunststof voet) of Ø 32 mm (bij aluminium voet) wordt stevig gemonteerd op een vijftienige voet.
- De verstelbare buis glijdt bij aluminium voet in een kunststof vloestofdichtende huls.
- De vergrendeling van de verstelbare buis gebeurt d.m.v. een spanknop.
- Optioneel kan een druppelglashouder met druppelglas voorzien worden.
- Alle stalen onderdelen worden afgewerkt met een chroomlaag.
- De aluminium voet wordt gepolijst.
- Het geheel rust op 5 designwielen Ø 80 mm, waarvan 2 geremd.




Afmetingen en prestaties

02594 | kunststof voet

- verstelbare hoogte: 130 tot 200 cm.
- breedte kunststof voet: 59 cm
- maximum belasting: 2 kg per haak (max. 8 kg in totaal).

02594 | alu-voet

- verstelbare hoogte: 155 tot 200 cm.
- breedte alu voet: 59 cm
- maximum belasting: 2 kg per haak (max. 8 kg in totaal).

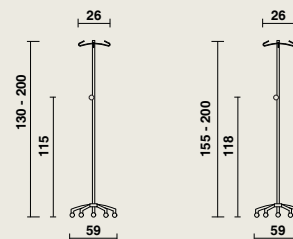

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: verchroomd staal.
- Kunststof.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Druppelglashouder met druppelglas.

